

# PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei  
und herstellerunabhängig von uns beraten:



**09681 796910**



**ANFRAGE@4MEDIC.DE**



**Ihr Kontakt zu uns**

**09681 796910**

info@4medic.de | www.4medic.de  
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4 | m e d i c <sup>TM</sup>

SCHILLER  
MS-2007

# CARDIOVIT MS-2007

Kleines und handliches  
12-Kanal-EKG-Gerät



# CARDIOVIT MS-2007

Das **CARDIOVIT MS-2007** ist ein leichtes, tragbares und kompaktes EKG-Analysesystem, das Sie überallhin begleitet. Aus diesem Grund wurde das Gerät so konzipiert, dass Sie es nur anschließen und sofort benutzen können, dabei aber keine Abstriche bei der Qualität der EKG-Daten hinnehmen müssen. Somit eignet sich das **CARDIOVIT MS-2007** ideal für Hausbesuche.



## BEWÄHRTE 12-KANAL-EKG-QUALITÄT

Hochstehende Diagnosewerkzeuge liefern Ihnen beste EKG-Analysen, und die benutzerfreundliche Bedienung erlaubt es Ihnen, sich auf die Diagnose und Behandlung zu konzentrieren.

- ❖ 12-Kanal-Farbbildschirm für eine präzise Anzeige
- ❖ 12-Kanal-Echtzeit-Ausschrieb
- ❖ Intuitiver Touchscreen für eine einfache Bedienung
- ❖ Kompakt und leicht: nur 1,2 kg
- ❖ Lithium-Polymer-Akku:  
Bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb  
oder 100 EKG-Aufnahmen

## PATIENTENDATEN

Einfache Eingabe der Patientendaten über die intuitive Touchscreen-Tastatur.

## AUTOMATISCHE VORSCHAU

Die digitale Bildschirmvorschau ermöglicht die Anzeige des EKGs vor dem Ausdrucken, um Papier und kostspielige erneute Untersuchungen zu vermeiden.



Patientendaten immer sichtbar

Eingebauter hochauflösender Thermodrucker

Anzeige aller Daten: Rhythmus, Mittelwerte, Messungen und Interpretation

Änderung der Ableitungskonfiguration mit nur einem Fingertipp

Verfügbarkeit innerhalb von Sekunden dank Schnellstart

Vorschau zur Qualitätskontrolle vor dem Ausdrucken oder Senden des Berichts


### CCA-ALGORITHMUS

Der CCA-Ausdruck mit Vorschau liefert Ihnen ...

a) Informationen zum Patienten und EKG-Signal

b) Lage des Koronarverschlusses

c) Empfehlungen zur optimalen Behandlung

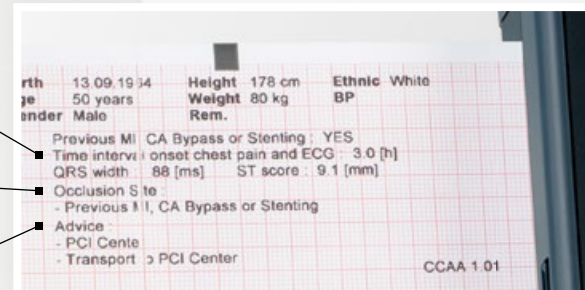

## ANALYSE

**SCHILLER Interpretationssoftware „C“:** Die Software bietet Ihnen eine umfassende computergestützte Analyse für Erwachsene und Kinder zur schnellen und zuverlässigen Auswertung von EKGs.

**Frühzeitige STEMI-Erkennung:** SCHILLER hat in Zusammenarbeit mit Professor Hein J. Wellens, MD, den Culprit Coronary Artery Algorithm (CCA) entwickelt, mit dem sich Koronarverschlüsse bei einem frühzeitig erkannten ST-Hebungsinfarkt sofort und genau lokalisieren lassen. Durch unseren Algorithmus kann der Patient nicht nur schneller die richtige medizinische Versorgung erhalten, der Algorithmus gibt auch die genaue Lage des Verschlusses in der Koronararterie und die Größe des gefährdeten Bereichs an.

## ABLAUFGESTÜTZTE EKG-DATENVERWALTUNG

Durch die Anbindung an das SCHILLER Datenverwaltungssystem SEMA, können die Daten aus dem CARDIOVIT MS-2007 zentral auf Ihrem PC gespeichert und durchsucht werden. SEMA ist ein vollständig skalierbares Programm, in das auf einfache Art zusätzliche Funktionen und effizientere EKG-Abläufe integriert werden können. Ebenfalls können ganze Auftragslisten aus einem HL-7-System oder PACS (DICOM Modality Worklist) heruntergeladen werden. Das Gerät kann die Aufnahmen anschliessend wieder als HL-7, DICOM oder PDF (inklusive Kurvendaten) an Ihr EPA- (elektronische Patientenakte) oder KIS-System (Krankenhausinformationssystem) exportieren<sup>1</sup>.



### INTEROPERABILITÄT

Die SEMA-Software läuft auf verschiedenen Plattformen.

<sup>1</sup> DICOM- und HL-7-Schnittstellen für den Import und Export sind als Teil des SCHILLER Servers erhältlich.



**Asia**  
**SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia**  
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Phone +603 6272 3033  
 Fax +603 6272 2030  
 sales@schiller.com.my  
 www.schiller-asia.com



**Austria**  
**SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.**  
 A-4040 Linz  
 Phone +43 732 709 90  
 Fax +43 732 757 000  
 sales@schiller.at  
 www.schiller.at



**China**  
**Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.**  
 100015 Beijing, China  
 Phone +86-10-84565453  
 info@schillermedical.com  
 www.schillermedical.cn



**France**  
**SCHILLER Médical S.A.S.**  
 F-67162 Wissembourg/Cedex  
 Phone +33 3 88 63 36 00  
 Fax +33 3 88 94 12 82  
 info@schiller.fr  
 www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
**SCHILLER France S.A.S.**  
 F-77600 Bussy St Georges  
 Phone +33 1 64 66 50 00  
 Fax +33 1 64 66 50 10  
 infoschiller@schiller-france.fr  
 www.schiller-france.com



**Germany**  
**SCHILLER Medizintechnik GmbH**  
 D-85622 Feldkirchen b. München  
 Phone +49 89 62 99 81-0  
 Fax +49 89 609 50 90  
 info@schillermed.de  
 www.schillermed.de



**Hungary**  
**SCHILLER Diamed Ltd.**  
 H-1141 Budapest  
 Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491  
 Fax +36 (1) 383-4778  
 sales@schiller.at  
 www.schiller-hungary.hu



**India**  
**SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.**  
 Mumbai - 400 001, India  
 Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141  
 Fax +91 22 2920 9142  
 sales@schillerindia.com  
 www.schillerindia.com



**Croatia**  
**Schiller medicinski instrumenti d.o.o.**  
 10000 Zagreb  
 Phone +385 1 309 66 59  
 Fax +385 1 309 66 60  
 info@schillerzg.hr  
 www.schiller.ch



**Latin America**  
**SCHILLER Latin America, Inc.**  
 Doral, Florida 33172  
 Phone +1 954 673 0358  
 Fax +1 786 845 06 02  
 sales@schillerla.ch  
 www.schillerla.ch



**Poland**  
**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**  
 PL-02-729 Warszawa  
 Phone +48 22 8432089  
 Fax +48 22 8432089  
 schiller@schiller.pl  
 www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
**SCHILLER AG Rep. office**  
 125124 Moscow, Russia  
 Phone +7 (495) 970 11 33  
 Fax +7 (495) 970 11 33  
 mail@schiller-ag.com  
 www.schiller-cis.com



**Serbia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 11010 Beograd  
 Phone +381 11 39 79 508  
 Fax +381 11 39 79 518  
 info@schiller.rs  
 www.schiller.rs



**Slovenia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 2310 Slovenska Bistrica  
 Phone +386 2 843 00 56  
 Fax +386 2 843 00 57  
 info@schiller.si  
 www.schiller.si



**Spain**  
**SCHILLER ESPAÑA, S.A.**  
 E-28230-Las Rozas/Madrid  
 Phone +34 91 713 01 76  
 Fax +34 91 355 79 33  
 schiller@schiller.es  
 www.schiller.es



**Switzerland**  
**SCHILLER-Reomed AG**  
 CH-8953 Dietikon  
 Phone +41 44 744 30 00  
 Fax +41 44 740 37 10  
 sales@schiller-reomed.ch  
 www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
**SCHILLER TÜRKIYE**  
 Okmeydanı-Sisli – Istanbul  
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
 Fax +90 212 210 8684  
 sales@schiller-turkiye.com  
 www.schiller-turkiye.com



**USA**  
**SCHILLER America Inc.**  
 Doral, Florida 33172  
 Phone +1 786 845 0620  
 Fax +1 786 845 06 02  
 sales@schilleramerica.com  
 www.schilleramerica.com

Article no.: 2.500621 11/14, DE



**SCHILLER**

The Art of Diagnostics