

# PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei  
und herstellerunabhängig von uns beraten:



**09681 796910**



**ANFRAGE@4MEDIC.DE**



**Ihr Kontakt zu uns**

**09681 796910**

info@4medic.de | www.4medic.de  
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4 } m e d i c <sup>TM</sup>




# DEFIGARD 4000

**Der vielseitige Lebensretter**  
Mit dem DEFIGARD 4000 ist die  
Defibrillation kinderleicht



MULTIPULSE  
BIOWAVE

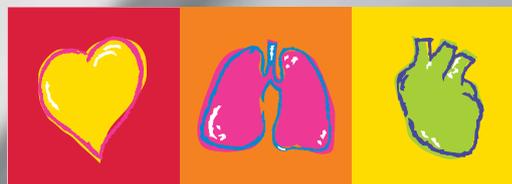

# SCHILLER

The Art of Diagnostics


# DEFIGARD 4000

## Einfache und intuitive Bedienung – mit nur einem Knopfdruck haben Sie Zugriff auf die wichtigsten Funktionen:

- Wahl der Defibrillationsenergie im manuellen Modus, Wahl des Schrittmachermodus, SAED.
- Der DEFIGARD 4000 ist ein biphasischer Defibrillator mit *MULTIPULSE BIOWAVE*® Technologie und Energieeinstellungen bis zu 200 Joule.
- Die Energiestärken 2, 4, 8, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150 und 200 Joule sind verfügbar.
- Auf dem hellen, übersichtlichen 5,9"-Bildschirm sind EKG-Kurven, Herzfrequenz, Plethysmogramm und SpO<sub>2</sub>-Werte jederzeit gut ablesbar.

All dies in einem kompakten und leichten Gerät.

Seine Benutzerfreundlichkeit und sein Design, kombiniert mit dem einmaligem Preis-Leistungs-Verhältnis, machen den DEFIGARD 4000 zum perfekten Gerät für alle Notfälle, sei es im Krankenhaus oder ausserhalb.

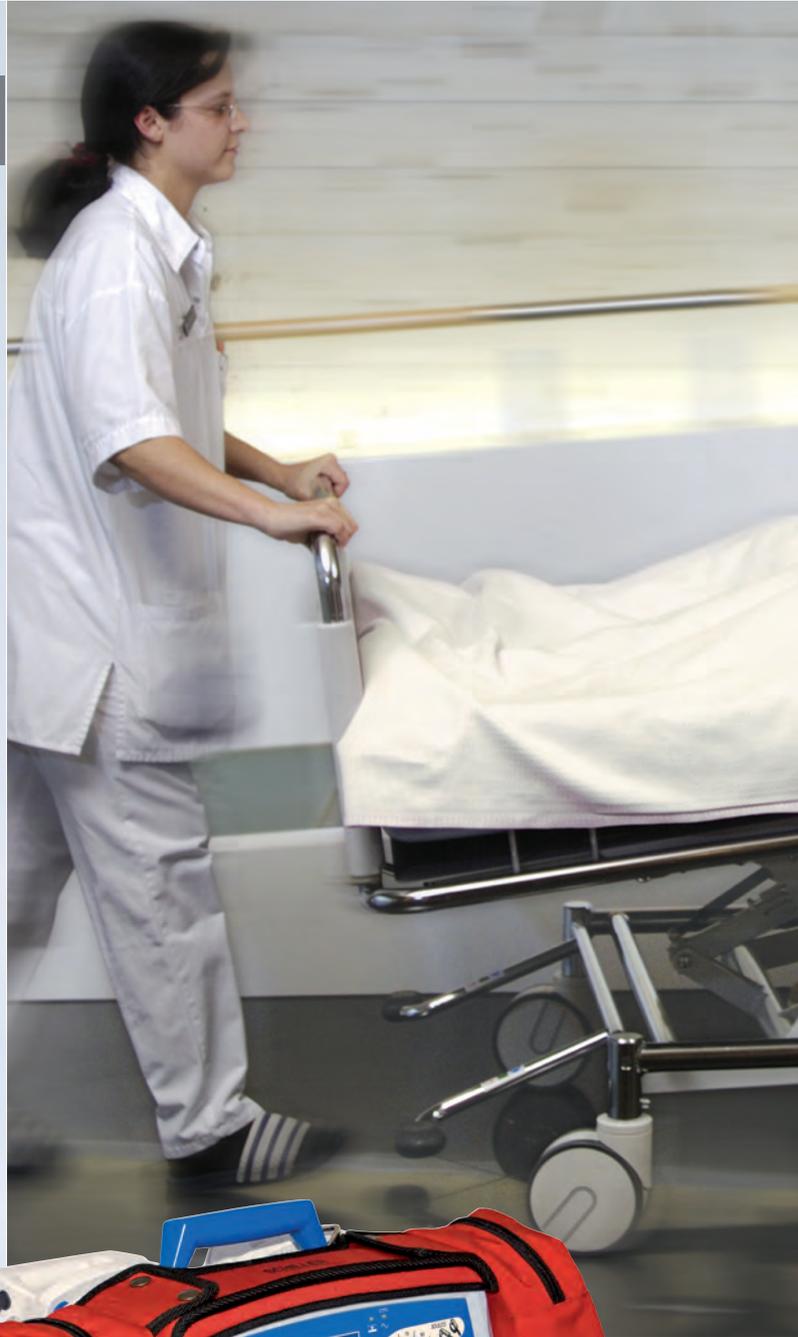

### Einsatz im Krankenwagen wie auch im Flugzeug:

Die für 15 g zertifizierte Halterung erlaubt eine Anwendung auf der Strasse wie auch in der Luft.

Die Halterung ist mit einer DC/DC-Speisung ausgerüstet, wodurch das Gerät direkt via Halterung gespeist werden kann.

Das Gerät kann mit nur einer Bewegung aus der Halterung genommen werden.

DEFIGARD 4000 mit Paddles und Taschen



## DEFIGARD 4000

### DEFIGARD 4000, das Multitalent unter den Defibrillatoren:

Mit Klebeelektroden oder Paddles erhältlich

- **Manuelle Defibrillation**
- **Halbautomatische Defibrillation (Option)**  
Das Gerät führt den Anwender mit Sprach- und Textmeldungen durch die Defibrillation. Die Energie wird automatisch angepasst wenn Kinderelektroden angeschlossen werden
- **Herzschrittmacher (Option)**  
Betriebsarten Fix, Demand und Overdrive (Frequenz x3).
- **Überwachung**  
1 bis 6 Ableitungen – Anzeige einer EKG-Kurve und Plethysmogramm ODER zwei EKG-Kurven, wovon eine fix ist.
- **SpO<sub>2</sub> Masimo (Option)**  
Start der Messung wenn ein Sensor erkannt wird
- **Drucker mit 3-Kanal-Darstellung (Option)**
- **Speicher**  
Bis zu 13 Stunden EKG-Daten oder 500 Ereignisse oder 80 Minuten EKG-Daten und Tonaufzeichnung und 500 Ereignisse im SAED-Modus.
- **USB-Schnittstelle** für Datenexport aus dem Speicher und Software-Update.



Wandhalterung





**Asia**  
**SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia**  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
Fax +603 6272 2030  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
**SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.**  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 709 90  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
**Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.**  
100015 Beijing, China  
Phone +86-010-52007020  
diamond@schillermedical.com  
www.schiller.cn



**France**  
**SCHILLER Médical S.A.S.**  
F-67162 Wissembourg/Cedex  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 94 12 82  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
**SCHILLER France S.A.S.**  
F-77600 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
infoschiller@schiller-france.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
**SCHILLER Medizintechnik GmbH**  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81-0  
Fax +49 89 62 99 81-54  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Hungary**  
**SCHILLER Diamed Ltd.**  
H-1141 Budapest  
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491  
Fax +36 (1) 383-4778  
sales@schiller.at  
www.schiller-hungary.hu



**India**  
**SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.**  
Mumbai - 400 001, India  
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Japan**  
**SCHILLER Japan, Ltd.**  
Hiroshima 734-8551  
Phone +81 82 250 2055  
Fax +81 82 253 1713  
koji.maekawa@schiller.jp  
www.schiller.jp



**Croatia**  
**Schiller medicinski instrumenti d.o.o.**  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzgj.hr  
www.schiller.ch



**Latin America**  
**SCHILLER Latin America, Inc.**  
Doral, Florida 33172  
Phone +1 954 673 0358  
Fax +1 786 845 06 02  
info@schillerla.ch  
www.schillerla.ch



**Poland**  
**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 8432089  
Fax +48 22 8432089  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
**SCHILLER AG Rep. office**  
125124 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller-ag.com  
www.schiller-cis.com



**Serbia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
**SCHILLER ESPAÑA, S.A.**  
E-28230-Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
**SCHILLER-Reomed AG**  
CH-8953 Dietikon  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
**SCHILLER TÜRKİYE**  
Okmeydanı-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
sales@schiller-turkiye.com  
www.schiller-turkiye.com



**USA**  
**SCHILLER America Inc.**  
Doral, Florida 33172  
Phone +1 786 845 0620  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramerica.com  
www.schilleramerica.com

