

PRODUKTINFORMATIONEN

Lassen Sie sich 100% kostenfrei
und herstellerunabhängig von uns beraten:



09681 796910



ANFRAGE@4MEDIC.DE



Ihr Kontakt zu uns

09681 796910

info@4medic.de | www.4medic.de
Gerberstraße 11 · 92670 Windischeschenbach

4  m e d i c TM

Sehtestgerät Visiolite 4K

Visiolite 4K Edition und Premium für die praktische Arbeitsmedizin


Das Visiolite 4K bietet mit dem neuen 5 Zoll 4K-LCD-Display und der neuen Software VisioWin eine exzellente Bildqualität und hohe Flexibilität für die Durchführung der Tests.

Neue Software VisioWin

Die neue VisioWin Software ist intuitiv bedienbar und ermöglicht eine effiziente Durchführung der Untersuchungen. Die bereits vorkonfigurierten Sequenzen erleichtern den Arbeitsablauf und können schnell und einfach an spezielle Arbeitsabläufe angepasst werden. Die aktuellen Grenzwerte für die einzelnen Untersuchungen sind verfügbar und erleichtern die Testauswertung. Ändern sich Auswertekriterien können diese selbst vom Anwender angepasst werden.

Mobil und ergonomisch

Das Gerät ist mit 4,5 kg ein Leichtgewicht und ist mit dem speziellen Rollenkoffer ideal für unterwegs. Durch einfache Höhenverstellung kann das Gerät an die Körpergröße des Probanden angepasst werden. Der elektronische Sensor für die Stirnauflage garantiert die richtige Platzierung des Kopfes. Die zwei Einblickwinkel für die Ferne und Nähe sind für Gleitsichtbrillenträger optimal.

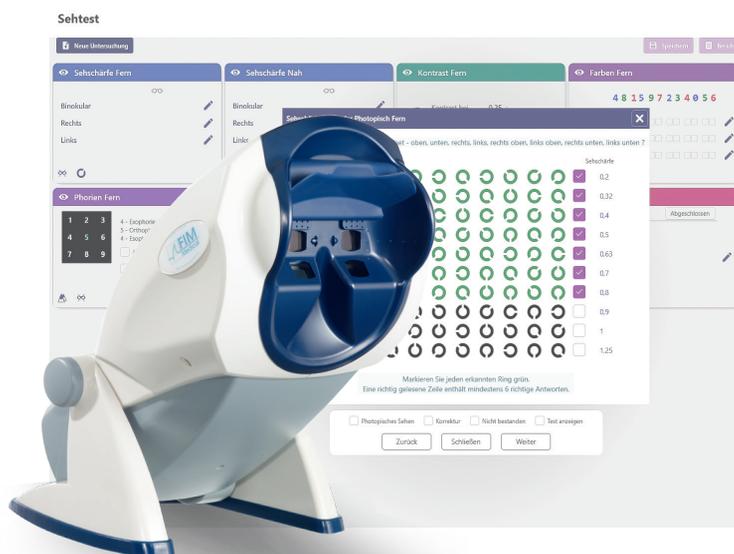

Visiolite auf einen Blick

- Für Untersuchungen nach FSÜ- Fahr-, Steuer und Überwachungstätigkeiten Stufe 1 und 2, TBS-Bildschirm, ABS-Absturzgefahr, und ZfP-Zerstörungsfreie Prüfung, Sehschärfeproofung FEV AB und CD
- Zusätzlich mit neuer LCD-Fernbedienung erhältlich
- Gewicht nur 4,5 kg
- Transportabel im speziellen Rollenkoffer
- Getrennter Einblickwinkel für Fern- und Nahsicht – ideal für Gleitsichtbrillen
- Version mit Blendempfindlichkeitstest

Komfortabel und vielseitig

Alle Versionen sind mit der VisioWin Software ausgestattet und können über die GDT-Schnittstelle in externe arbeitsmedizinische Softwares eingebunden werden. Die Software verfügt zusätzlich über eine eigene Datenbank, so dass die Ergebnisse auch lokal gespeichert werden können.

Die Versionen 4K Edition Bundle und 4K Premium GT Bundle sind mit einer LCD-Fernbedienung ausgestattet. So kann das Gerät auch ohne PC mit der Fernbedienung genutzt werden und die Ergebnisse auf dem Auswertebblatt dokumentiert werden.

Technische Daten

Spezifikationen Visiolite

- Tests
- Sehschärfe, monokular/binokular (Landoltringe nach DIN 58220, Zahlen)
 - Kontrastsehen
 - Vertikale und horizontale Phorie
 - Stereotest
 - Farbttest nach Ishihara
 - Horizontales und zentrales Gesichtsfeld
 - Amslergitter

Allgemein

- Abmessungen: B x H x T: 27 x 50 x 25 cm
 Gewicht: 4,5 kg
 Stromversorgung: 24 Watt / 12 Volt
 Gleichspannung von einer externen medizinischen Versorgungseinheit
- Garantie: 2 Jahre
 Hintergrundbeleuchtung: Dual (2x12 LEDs)

Visiolite 4K und Zubehör:

NORMEN

- Referenznormen: EN60601-1, EN60601-1-2, NF EN ISO 8596
- Kennzeichnung: CE
- Medizinische Klasse: Klasse I
- Anwendungsteil: Typ B

Varianten:

- Visiolite 4K Edition (mit Software)
- Visiolite 4K Edition Bundle (mit Software, Fernbedienung und Rollenkoffer)
- Visiolite 4K Premium GT (mit Software, Blendung)
- Visiolite 4K Premium GT Bundle (mit Software, Blendung, Fernbedienung, Rollenkoffer)

Standardzubehör:

- Gerät mit integrierter Software
- Netzkabel
- USB Kabel
- LCD-Fernbedienung mit ihrem großen Touchscreen und Anschlusskabel
- 5 Auswertblätter (Kopiervorlage (4K Edition Bundle und 4K Premium GT Bundle))
- Spezieller Rollenkoffer (4K Edition Bundle und 4K Premium GT Bundle)
- Kurzanleitung



Visiolite 4K



Fernbedienung



Rollenkoffer



Software VisioWin

(ohne Monitor)

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

Diatec Diagnostics GmbH

Sickingenstraße 70-71 | 10553 Berlin | Deutschland

Tel.: +49 30 707 146 20

vertrieb@diatec-diagnostics.de | www.diatec-diagnostics.de